

Monitor de Presión Arterial de Brazo Automático HEM-7320










- Operación simple y silenciosa, con el toque de un botón
- Funciones avanzadas:
 - ✓ Guía de ajuste del brazalete
 - ✓ Detector de error de movimiento
 - ✓ Detector de latido irregular
 - ✓ Valor promedio de lecturas previas
 - ✓ 100 memorias con fecha y hora
 - ✓ 5 años de garantía

HEM-7320

El monitor de brazo Elite+ es muy fácil de usar, incluye brazalete *Intelli Wrap* para brazos de tamaño normal y grande (22 a 42 cm). El indicador de irregularidades en la presión arterial, muestra un promedio semanal de las mediciones tomadas por la mañana y por la noche.



-  **GUÍA DE AJUSTE DEL BRAZALETE:** Este símbolo aparece en el monitor, alertando al usuario cuando el brazalete no está colocado correctamente.
-  **DETECTOR DE ERROR DE MOVIMIENTO:** Este símbolo aparece en el monitor, avisando cuando se produce un error en la lectura debido a un movimiento excesivo del usuario.
-  **DETECTOR DE LATIDO IRREGULAR:** Cuando el monitor detecta un ritmo irregular dos o más veces durante la medición, aparece este símbolo en la pantalla con tus resultados. Te recomendamos que consultes a tu médico.

-  **VALOR PROMEDIO DE LECTURAS PREVIAS:** El monitor calcula y muestra el promedio de las tres mediciones más recientes.
-  **INDICADOR DE IRREGULARIDADES EN LA PRESIÓN ARTERIAL:** Calcula y muestra un promedio semanal de las mediciones tomadas por la mañana y por la noche. Almacena 8 semanas de promedios matutinos y 8 nocturnos.
-  **100 MEMORIAS CON FECHA Y HORA:** El HEM-7320 almacena las últimas 100 mediciones, lo que permite al usuario encontrar previas mediciones con facilidad y monitorear cambios en la presión arterial.
-  **5 AÑOS DE GARANTÍA:** Garantía limitada de cinco años que le da tranquilidad.

Precauciones: El monitor no está diseñado para ser utilizado como dispositivo de diagnóstico, consulte siempre a su médico, es peligroso que se autodiagnostique según los resultados de las mediciones y que decida usted mismo sobre su tratamiento. **No utilice el dispositivo en un vehículo en movimiento (auto, avión). Lea el manual de instrucciones.**



Monitor de Presión Arterial de Brazo Automático HEM-7320



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

Caja	Cantidad	Peso aprox.	Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)
Unidad:	1 unidad	1.1 kg	160 mm x 221 mm x 180 mm
Caja Máster:	8 unidades	10.1 kg	740 mm x 252 mm x 335 mm
Código UPC:	073796732028		
Máster UPC:	20073796732022		

ESPECIFICACIONES:

Modelo: HEM-7320

Pantalla: Pantalla digital LCD

Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg, pulso: 40 a 180 latidos / min.

Precisión: Presión: ± 3 mmHg, pulso: ± 5 % de lectura

Inflado: Controlado con lógica difusa mediante bomba eléctrica

Desinflado: Válvula de liberación automática de presión

Método de medición: Método oscilométrico

Clasificación IP: IP 20

Fuente de alimentación: 4 x 1.5 V (pilas alcalinas "AA")

Vida útil de las pilas: Aproximadamente 1000 mediciones con 4 pilas alcalinas nuevas

Pieza aplicada:  = Tipo BF

Protección contra descarga eléctrica: Equipo ME encendido internamente

Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo

Temperatura de operación / humedad: 10 °C a 40 °C / 15 a 90 % de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento / humedad / presión de aire: - 20 °C a 60 °C / 10 a 95 % de humedad relativa 700 a 1060 hPa

Peso de la unidad principal: Aproximadamente 380 g (sin incluir las pilas)

Peso del brazalete: Aproximadamente 163 g

Dimensiones de la unidad principal: Aproximadamente 124 mm x 90 mm x 161 mm

Dimensiones del brazalete: Aproximadamente 145 mm x 532 mm (tubo de aire: 750 mm)

Circunferencia del brazalete: 220 a 420 mm

Memoria: Hasta 100 lecturas


Contenido del paquete: Unidad principal, brazalete, estuche de almacenamiento, 4 pilas alcalinas "AA", estuche y manual de instrucciones




INTELLI WRAP
Reduce el riesgo de mediciones incorrectas

22-42 cm


Intelli Wrap (Brazalete Inteligente) ayuda a prevenir los errores de medición debidos a la incorrecta colocación del brazalete, obteniendo resultados más precisos. Esto se consigue gracias a nuestro brazalete *Intelli Wrap* que se expande y cubre toda la circunferencia del brazo, asegurando la adecuada compresión de la arteria braquial.

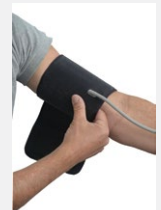

Sección transversal del brazo

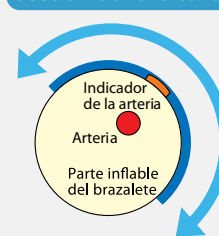

Brazalete regular

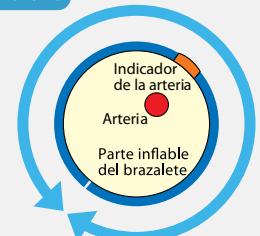

Brazalete INTELLI WRAP

Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.

www.omronhealthcare.mx



Síguenos en:
facebook.com/OmronHealthcareMéxico

OMRON