

MONITOR DE GRASA CORPORAL

HBF-306

TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN EN SU HOGAR

Monitorear su porcentaje de grasa corporal (en lugar de simplemente su peso) le ayuda a saber que está perdiendo el peso correcto: grasa en lugar de músculo.

IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA

Este monitor usa la Impedancia Bioeléctrica para medir su grasa corporal en base a sus datos personales. Envía una corriente débil a través del torso de su cuerpo para una medición en segundos.



↘ HBF-306INT

Este monitor muestra el valor aproximado del porcentaje de grasa corporal mediante el método de Impedancia Bioeléctrica y además indica el índice de masa corporal en cuatro rangos: bajo, normal, elevado y muy elevado.



Índice de masa corporal
Cálculo automático de la composición corporal que determina el equilibrio entre la altura y el peso.



Porcentaje de grasa corporal
La cantidad de masa compuesta de grasa corporal como parte del peso total del cuerpo



Perfil personal + invitado
Guarda hasta 9 perfiles personales. Modo Guest (invitado).

MONITOR DE GRASA CORPORAL



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja	Cantidad	Peso aprox.	Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)
Unidad:	1 unidad	400 g	220 mm x 154 mm x 59 mm
Caja Master:	12 unidades	6530 g	404 mm x 269 mm x 358 mm
Código UPC:	073796030636		

CARACTERÍSTICAS

- 1 año de garantía (referir al manual de instrucciones para detalles)
- Impedancia Bioeléctrica para medir la grasa corporal en segundos
- El manual de instrucciones incluye horarios de medición recomendados, IMC y pautas para el porcentaje de grasa corporal según la edad y el sexo, cómo calcular su Índice FIT
- Mide de acuerdo con el índice FIT calculado en modo NORMAL o ATLÉTICO

ESPECIFICACIONES

Fuente de Alimentación: 2 Pilas AAA

Pantalla: Porcentaje de grasa corporal: de 4.0 a 50.0%
IMC: de 7.0 a 90.0

Rangos para la configuración de valores:
Altura: 100.0 cm a 199.5 cm (de 3 pies y 4 pulgadas a 6 pies y 6 pulgadas)

Peso: 10.0 a 199.8 kg (de 23 a 440.5 libras)

Edad: NORMAL: de 10 a 80 años de edad

ATLÉTICO: de 18 a 60 años de edad

Sexo: Masculino / Femenino


Temperatura y humedad de funcionamiento: De 10°C a 40°C, de 30% a 85% HR

Temperatura y humedad de almacenamiento: De -20°C a 60°C, de 10% a 95% HR

Dimensiones externas: Aprox. 197 (Ancho) x 128 (Alto) x 49 (Profundidad) mm

Peso: Aprox. 230 g (sin incluir las pilas)

Contenido: 1 monitor de grasa corporal, 2 pilas AAA, 1 manual de instrucciones

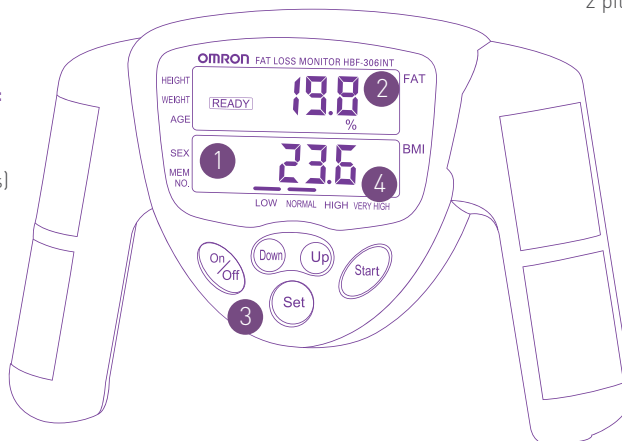

- 1 Barra de clasificación del IMC**
Brinda una fácil comprensión de su nivel de composición corporal.
- 2 Pantalla grande**
Para una fácil visualización de sus mediciones.
- 3 Configuración para 9 perfiles de usuario + invitado**
Guarda hasta 9 perfiles de usuario para una fácil medición, sin tener que reingresar sus datos personales en cada medición.
- 4 Sistema Métrico y Sistema Inglés**
Uso intercambiable del Sistema Métrico o Sistema Inglés, según su preferencia.

Las especificaciones y aspecto están sujetos a cambio sin previo aviso para fines de optimización.